



Folkhälsomyndigheten

Förslag på förpackning och märkning av prover från misstänkt eller bekräftad covid-patient.

Prover som tagits från patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska tillordnas UN3373- Biologiskt ämne, kategori B. På grund av den omfattande provtagningen som sker för covid-19 har behov av förenklade provflöden identifierats. I detta dokument ges förslag på en förpackningslösning som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P650 i ADR-S och samtidigt ger möjlighet att på ett enkelt sätt skicka många prover. Mer om dessa bestämmelser finns i Packa Provet Rätt.

Bestämmelser i korthet

- Prov ska förpackas i en förpackning bestående av tre lager (primärkärl, sekundärförpackning, ytterförpackning)
- Om primärkärlet innehåller vätska ska absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera hela vätskeinnehållet placeras i sekundärförpackningen.
- De två innersta lagren (primärkärl och sekundärförpackning) ska vara täta. Detta gäller även förslutningen av dem.
- Ett av de två yttre lagren (sekundär- eller ytterförpackning) ska vara styv.
- Ytterförpackningen ska ha en sida som är minst 10x10 cm.
- Ytterförpackningen måste förslutas på ett sådant sätt att förpackningen inte av misstag öppnas om den faller från 1,2 meter.

Förslag på förpackning vid vägtransport av flera prover i en förpackning

Detta förslag bygger på de provboxar (transportbox för laborieprover) som dagligdags används inom flera regioner för transport av större mängder prover.

Lager 1 (primärkärlet) som består av ordinarie rör för det relevanta provtagningsmaterialet. Detta kan till exempel vara röret som nasopharynx-pinnen kommer i, ett plaströr för en bomullspinne, ett blodrör eller en fecesburk.


Primärkärlen kan stå i ett ställ eller motsvarande om det underlättar. Ett eller flera primärkärl placeras tillsammans med absorberande material (i tillräcklig mängd för att absorbera hela provets innehåll) i...

...lager 2 (sekundärförpackningen) som består av en plastpåse. Denna försluts på ett sådant sätt att påsen blir tät. Beroende på förutsättningar kan detta till exempel vara genom att tejpa igen påsen eller genom att använda en påsklämma. Den förslutna påsen placeras i ...

... lager 3 (ytterförpackningen) bestående av en provbox/transportbox för laboratorieprover. Annan styv förpackning, t.ex. en kartong, kan användas förutsatt att denna förslutas på ett sådant sätt att den inte går upp vid ett fall.

Ytterförpackningen märks med etikett för UN 3373 (se höger) samt texten "BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B" (minst 6 mm hög text).

Ytterförpackning och eventuell påsklämma kan återanvändas. Det krävs ingen särskilt utbildad transportör för att transportera provet. Det finns inga krav på dokumentation som ska åtfölja provet.

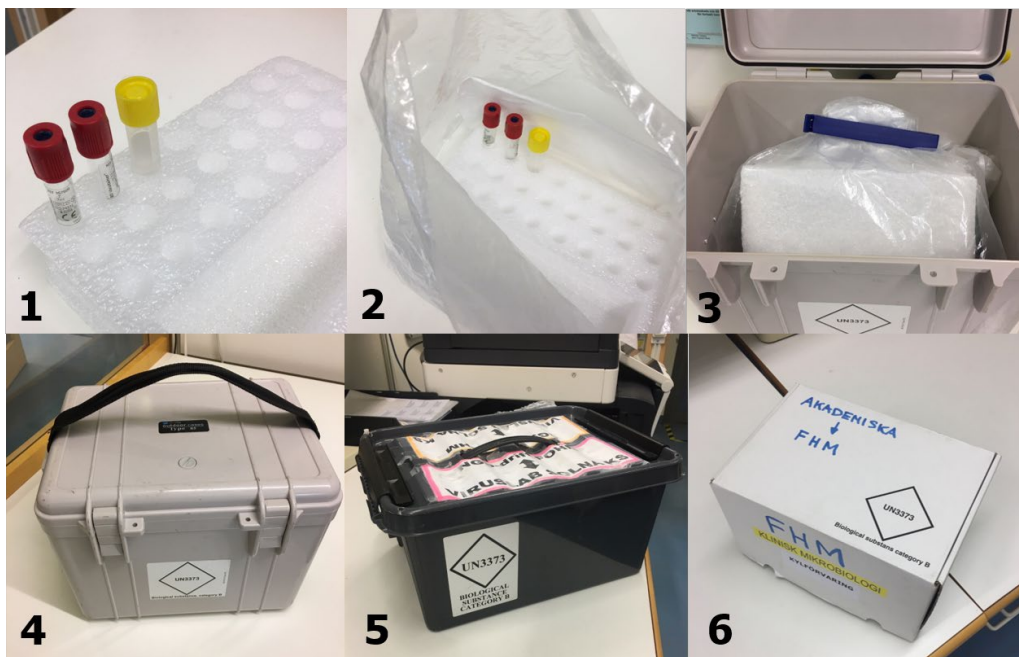

Förslag på förpackning: **1.** Primärkärl, i detta fall blodrör och rör med bomullspinne. **2.** Primärkärlen placeras i plastpåse tillsammans med absorberande material och i detta fall ett ställ. **3.** Plastpåsen försluts med en påsklämma och placeras i en ytterförpackning märkt med etikett UN3373 och texten "BIOLOGISKT ÄMNE KATEGORI B". **4.** Exempel på ytterförpackning, Provtransportlåda i plast. **5.** Exempel på ytterförpackning, plastlåda. **6.** Exempel på ytterförpackning, kartong.